

News Release



平成20年4月10日
経済産業省

消費生活用製品の重大製品事故に係る公表について

スズキ株式会社が製造した電動車いす（ハンドル型）の一部において、モーターに構造上の不具合があることが判明しました。このため、本日、同社はプレス発表を実施し、消費者に対する注意喚起を行うとともに、対象製品について、無償点検・部品交換を実施することとなりました。

経済産業省としましては、当該製品の使用者の皆様に対し、事故の再発防止のため、直ちに使用を中止し、速やかに事業者の設置するフリーダイヤルに連絡するよう呼びかけるものです。

また、無償点検・部品交換の対象機種において発生した重大製品事故として、消費生活用製品安全法第35条第1項の規定に基づき重大製品事故報告を受け、平成19年11月27日及び同年12月14日に製品起因か否かが特定できていない事故として公表した事故（A200700636、A200700703）及び平成20年4月9日に重大製品事故報告があった事故（A200800036）について、現在、事故原因の調査中ですが、モーターの構造上の不具合が事故原因に関係した可能性も払拭できないと考えられることから、これらの重大製品事故について本日、製品起因が疑われる事故として公表します。

1. 事故の概要

スズキ株式会社が製造した、電動車いす（ハンドル型）の一部において、上り坂の途中で前進不能となり後ろに下がる不具合が2件発生（いずれも人的被害なしの非重大製品事故）し、同社で調査した結果、モーターの巻線に電気を伝える部品に構造上の不具合があることが判明しました。このため、同社は、本日、プレス発表を実施し、同社ホームページに注意喚起情報を掲載するとともに、対象の電動車いすについて無償点検・部品交換を実施することとしました。

また、無償点検・部品交換の対象機種において、重大製品事故が3件発生しており、現在、事故原因の調査中ですが、モーターの構造上の不具合が事故原因に関係した可能性も払拭できないと考えられることから、これらの重大製品事故について本日、製品起因が疑われる事故として公表します。

2. 対象機種等

対象製品：平成19年5月までに製造した以下の製品

| | | |
|-----------|-------|---------|
| ・スズキセニアカー | ET-4D | 28,778台 |
| ・スズキセニアカー | ET-4E | 3,039台 |
| ・スズキセニアカー | ET-4F | 2,676台 |

| | | |
|-----------|------|-----|
| ・タウンパートナー | EK40 | 95台 |
|-----------|------|-----|

（「タウンパートナー」は、スズキ株式会社がシーケー販売株式会社に製品をOEM供給し、シーケー販売株式会社にて販売された製品）

3. 事業者の対応

対象となる電動車いすについて、モーターユニットを無償で交換します。

4. 事業者の告知

- ・事業者プレス発表 4月10日（木）15：00
- ・対象製品を出荷した販売店・個人に対して、ダイレクトメールを発送
- ・事業者ホームページでのリコール情報の掲載
- ・新聞社告（今後予定）

5. 消費者への注意喚起

消費者の皆様におかれましては、対象製品を使用されている場合には、直ちに使用を中止し、下記フリーダイヤルに速やかに御連絡ください。

なお、当該製品の警告ブザーが鳴るような急な坂道（勾配10度を超える坂道）の走行は、モーターに高い負荷がかかりますのでお止めください。

（スズキ株式会社の問い合わせ先）

フリーダイヤル：0120-402-219

受付時間：9：00～12：00、13：00～17：00

（土・日・祝日を含む）

（シーケー販売株式会社の問い合わせ先）

フリーダイヤル：0120-989-615

受付時間：9：00～18：00（土・日・祝日を除く）

（本発表資料のお問い合わせ先）

商務流通グループ製品安全課製品事故対策室

担当：鶴岡、義経

電話：03-3501-1707（直通）

■消費生活用製品の重大製品事故一覧

別 紙

ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故

| 管理番号 | 事故発生日 | 報告受理日 | 製品名 | 機種・型式 | 事業者名 | 被害状況 | 事故内容 | 事故発生都道府県 | 備考 |
|------------|-------------|-------------|--------------|------------|---------|------|---|----------|---|
| A200700336 | 平成19年11月15日 | 平成19年11月22日 | 電動車いす(ハンドル型) | ET-4D III型 | スズキ株式会社 | 死亡1名 | ガードレールが無い県道を走行中、約2メートル下の土砂置き場に転落し、死亡した。モーターに不具合があった可能性も考えられ、現在、原因を調査中。 | 富山県 | 平成19年11月27日に製品起因か否かが特定できていない事故として公表したものの。 |
| A200700703 | 平成19年12月1日 | 平成19年12月12日 | 電動車いす(ハンドル型) | ET-4D III型 | スズキ株式会社 | 重傷1名 | 電動車いすで走行中に側溝に落ち、側溝の上にあるブロック塀に頭を打ち付け、重傷を負った。モーターに不具合があった可能性も考えられ、現在、原因を調査中。 | 福井県 | 平成19年12月14日に製品起因か否かが特定できていない事故として公表したものの。 |
| A200800036 | 平成20年4月4日 | 平成20年4月9日 | 電動車いす(ハンドル型) | ET-4D I型 | スズキ株式会社 | 死亡1名 | 電動車いすで河川敷の道路(道幅2m)を走行中、砂利にハンドルをとられてコントロール不能になり、階段上部から約4m下の河原に転落した。モーターに不具合があった可能性も考えられ、現在、原因を調査中。 | 熊本県 | |

スズキ製電動車いすの無償修理について

2008年4月10日
スズキ株式会社

スズキ株式会社は、電動車いす『スズキセニアカー (ET-4D/ET-4E/ET-4F/ET-4FS)』について、構造上の不具合により、モーターの耐久性が低下する恐れがあることが判明いたしましたので、4月11日より当該部品につき無償修理を実施させていただくことと致しました。

取扱説明書に記載しているように、車両の警告ブザーが鳴るような急な坂道の走行はお止めいただくと共に、不具合の初期症状（以前よりも速度が出なくなった、発進時にガクガクする、警報ブザーが鳴り車両停止した状態）が確認された場合には、ご使用を中止いただき、最寄りの取扱店にご連絡いただきますよう、お願い申し上げます。

ご愛用の皆さまには大変ご迷惑をおかけし、心よりお詫び申し上げます。対象となるお客様には、お知らせのダイレクトメールまたは取扱店等からご案内させていただきますが、無償修理につきましては部品の手配が出来次第、あらためてご案内申し上げますので、最寄りの取扱店へご連絡いただき、修理（無料）をお受けいただきますようお願い申し上げます。

なお、電動車いす『スズキセニアカー』にはスズキ株式会社が製造し、シーケー販売株式会社にOEM出荷した車両を含みます。

1. 不具合の内容

スズキセニアカーは電気モーターの駆動により走行するもので、その動力はモーターブラシとモーター回転軸の電極が適正に接触することで発生する回転力より得ています。


当該セニアカーは、平成14年（2002年）より生産を開始するにあたり、消費電力の低減を目的にモーターブラシの接触圧力を下げる設計をしましたが、当該圧力が適切でなく、ブラシの機械摩耗が進む過程でブラシの接触圧力が低下し接触不良が発生することが判明致しました。

この接触不良によりモーターブラシと電極間でアーク（火花）が発生し電気摩耗が進行することで、早期にモーターブラシが限界磨耗に至り導通不良となり、故障を知らせるブザー音がなると共に安全装置により車両が停止します。

2. 改善の内容

対象車両は、モーターブラシの接触圧力が低くブラシ摩耗に対する耐久性が低いことから、モーターブラシのスプリングの張力を上げたものに変更すると共に、耐久性を上げたモーターに交換します。

| 改善前 | 改善後 |
|---|---|
| ブラシスプリングの接触圧力 29.4 kPa (300 gf/cm ²) | ブラシスプリングの接触圧力 49 kPa (500 gf/cm ²) |

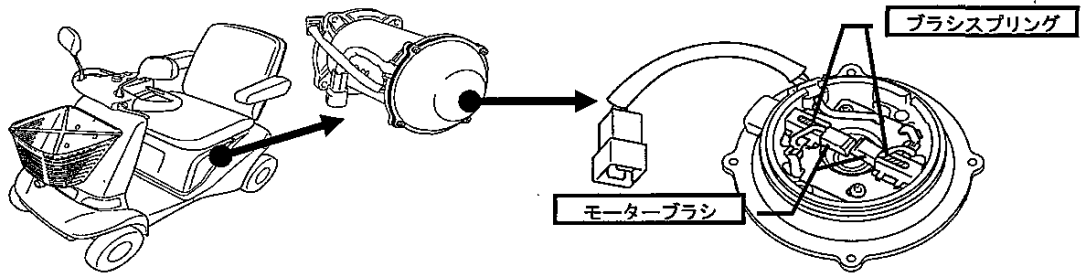

3. 対象車両の範囲

| 製品名 | 機種名 | 型式 | 当該製品の車台番号の範囲 及び製作期間 | 対象台数 |
|----------|-------------|------|---|--------|
| スズキセニアカー | ET-4D I型 | ET4D | ET4D-100001 ~ 108609 平成14年12月~平成16年5月 | 8,595 |
| | ET-4D II型 | ET4D | ET4D-200001 ~ 211575 ET4D-300001 ~ 300897 平成16年4月~平成18年3月 | 12,469 |
| | ET-4D III型 | ET4D | ET4D-400001 ~ 407284 ET4D-500001 ~ 500492 平成18年2月~平成19年5月 | 7,714 |
| | ET-4E I型 | ET4E | ET4E-100001 ~ 101373 平成14年9月~平成16年4月 | 1,357 |
| | ET-4E II型 | ET4E | ET4E-200001 ~ 201041 平成16年4月~平成18年3月 | 1,041 |
| | ET-4E III型 | ET4E | ET4E-300001 ~ 300642 平成18年4月~平成19年4月 | 641 |
| | ET-4F I型 | ET4F | ET4F-100001 ~ 100974 平成15年4月~平成16年5月 | 974 |
| | ET-4F II型 | ET4F | ET4F-200001 ~ 200915 平成16年6月~平成18年2月 | 915 |
| | ET-4F III型 | ET4F | ET4F-300001 ~ 300647 平成18年2月~平成19年5月 | 647 |
| | ET-4FS III型 | ET4F | ET4F-400001 ~ 400140 平成18年7月~平成19年5月 | 140 |


| | | | | |
|----------|------------|-------|--|----|
| タウンパートナー | EK-40D I型 | EK40D | EK40D-100001 ~ 100031 平成15年4月~平成16年5月 | 30 |
| | EK-40D II型 | EK40D | EK40D-200001 ~ 200040 平成16年6月~平成16年9月 | 40 |
| | EK-40S I型 | EK40S | EK40S-100001 ~ 100051 平成15年2月~平成15年2月 | 25 |

※「タウンパートナー」はOEM製品で、シーケー販売株式会社の商品名です。

当該製品の型式、車台番号については、下図の通りご確認ください。

・右後輪の内側、車体部分に型式、車台番号を記載したエンブレムが貼られています。

型式、車台番号の位置

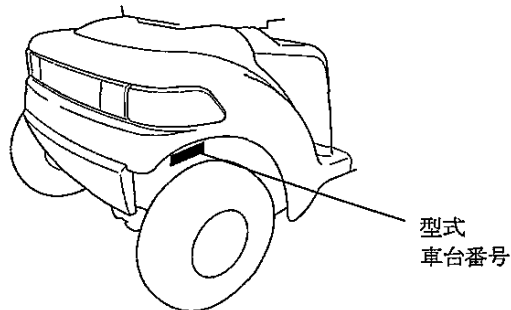

お客様のお問合せ先

「スズキセニアカー」に関するお問合せ先

静岡県浜松市南区高塚町300

スズキ株式会社 お客様相談室 コールセンター

フリーダイヤル 0120-402-219 (9:00~12:00、13:00~17:00)

※詳細はホームページからのご確認いただけます。

<http://www.suzuki.co.jp/about/recall/>

「タウンパートナー」に関するお問合せ先

東京都中野区本町3-30-40 KDX中野坂上ビル9F

シーケー販売株式会社 お客様相談室

フリーダイヤル 0120-989-615 (土・日・祝日を除く 9:00~17:00)

※詳細はホームページからのご確認いただけます。

<http://www.calsonic.jp/>

お客様からご提供いただきました氏名・住所・電話番号などの個人情報は
本件修理目的以外には使用いたしません。

事務連絡
平成20年4月11日

都道府県
各指定都市 障害保健福祉担当課（室） 御中
中核市

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部 障害福祉課
精神・障害保健課
企画課自立支援振興室

スズキ株式会社製電動車いす（ハンドル型）に係る
重大事故の公表及び無償修理について

平素より、障害保健福祉行政の推進につきましては、格段の御高配を賜り厚く御礼申し上げます。

今般、経済産業省において、別添1にあるようにスズキ株式会社が製造した電動車いす（ハンドル型）の重大事故の公表を行いました。

また、別添2にあるようにスズキ株式会社においても、同社製造の電動車いす「スズキセニアカー」等に構造上の不具合があるため、無償修理を実施する旨の公表を行いました。

つきましては、障害者等の日常生活全般を支援する観点から、これらの福祉用具が適切に使用され、事故等の発生を防止できるよう御理解、御協力いただくとともに、貴管内市町村、関係機関、関係団体及び利用者等に対しても、広く注意喚起くださいますようお願いいたします。

(照会先)

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部

企画課自立支援振興室社会参加支援係

電話 03-5253-1111 (内3006)

FAX 03-3503-1237